

Автоматизированная картография всего тела



Стандарт совершенства в ранней диагностике рака кожи

Меланома часто возникает совершенно неожиданно и без какой-либо предыстории. Именно поэтому стандартизованная фотография всей поверхности тела в сочетании с дерматоскопическим анализом является наилучшим методом комплексного мониторинга пациентов с высоким риском развития рака кожи. Полностью автоматизированная система FotoFinder **bodystudio ATBM** - это совершенно уникальный стандарт, предлагающий пациентам намного больше того, что обычно включает в себя простой осмотр кожи. Система эффективно контролирует всю поверхность кожи тела и следит за динамикой каждого отдельного новообразования.

Полная картография тела с исключительной быстротой

Видеодерматоскоп "FotoFinder **bodystudio ATBM**" производит стандартизованное документирование всей поверхности тела за минимальное время. Для изготовления полной фотографии тела пациента системе нужно сообщить только величину его роста, а фотокамера перемещается и работает автоматически. С помощью технологии FotoFinder **SmartMatch** система создаёт изображения высокого разрешения для каждой из четырёх сторон тела, включая ладони рук и подошвы ног.



Мы определяем мировой прогресс в анализе фотографий кожи.



Сочетание картографии тела с дерматоскопией

Видеодерматоскоп "FotoFinder **bodystudio ATBM**" – это уникальное сочетание картографии новообразований с их дерматоскопическим анализом. Все обнаруженные на снимках новообразования регистрируются под уникальным номером, а их микрофотоснимки автоматически привязываются к соответствующим маркерам на карте тела. Программа **Moleanalyzer** выдаёт результат анализа новообразований с общим баллом, позволяющим судить о степени злокачественности. Клинически подтверждённые показатели чувствительности достигают при этом 86%, а специфичности 83%.




Автоматизированный мониторинг на рак кожи

Пациенты с высоким онкологическим риском должны проходить клинический осмотр раз в три месяца. При каждом посещении делаются повторные снимки. Точное позиционирование пациента во время съёмки обеспечивает лазерный указатель. Программа FotoFinder **Bodyscan ATBM** автоматически сравнивает первичные и повторные снимки, идентифицируя новые или изменившиеся новообразования.


Максимальная гарантия точности результатов

Процедуры, выполняемые с помощью видеодерматоскопа "FotoFinder **bodystudio ATBM**", легко вписываются в ежедневный рабочий график. Они значительно экономят время, затрачиваемое на полное фотографирование тела. Полностью автоматизированная система видеодерматоскопии "FotoFinder **bodystudio ATBM**" прекрасно поддерживает и обогащает ваш медицинский опыт!

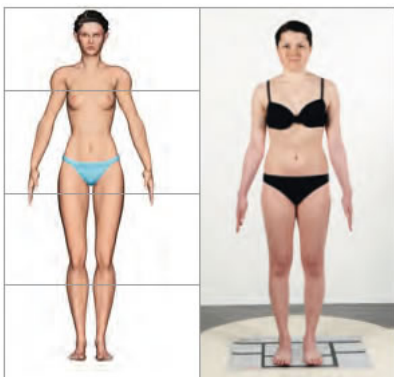

FotoFinder расширяет сферу применения документирования патологий кожи

Экспертная программа **PASlvision** позволяет произвести фотодокументирование псориаза и вычислить индекс PASI (Psoriasis Area and Severity Index, Индекс распространения и тяжести псориаза). Эта программа значительно расширяет сферу применения FotoFinder **bodystudio ATBM** в практике дерматологии.

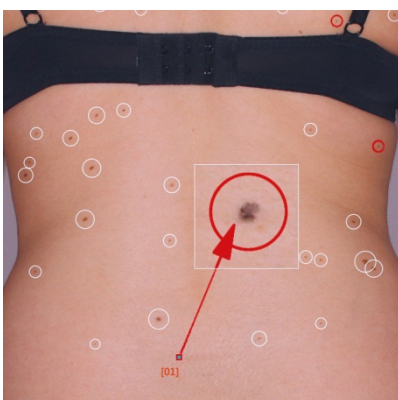

Очевидные преимущества системы:

- стандартизованное документирование всей поверхности тела,
- стойка с автоматическим управлением движением фотокамеры,
- лазерный указатель для точного позиционирования пациента,
- **Bodyscan ATBM** демонстрирует изменения немедленно,
- уникальное качество дерматоскопии в режиме Full HD,
- программа **Moleanalyzer** с подсчётом балла, указывающего на степень злокачественности,
- программа **PASlvision** для документирования псориаза,
- содержательные отчёты для пациентов,
- работа в локальной сети.

09/2016

